




**MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,
DES SOLIDARITÉS,
DES FAMILLES, DE L'AUTONOMIE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

FICHE PRATIQUE

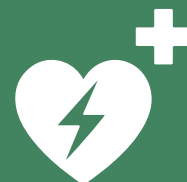

DAE

DÉCLARATION ET MAINTENANCE DE VOTRE DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE



Qu'est-ce qu'un DAE ?

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d'arrêt cardiaque. Accompagné d'un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie.

Il est conçu pour être utilisé par tous, même sans formation médicale. Chaque minute gagnée lors d'un arrêt cardiaque augmente fortement les chances de survie.

Déclarer et entretenir son DAE, c'est permettre à chacun d'agir dans l'urgence : vous êtes un maillon clé de la chaîne de survie.

Le DAE, un élément clé de la chaîne de survie



Déclarez votre DAE sur GéoDAE

- Vous devez enregistrer chaque DAE installé dans votre établissement (ERP, collectivité, entreprise, structure de soins ou d'accueil...)
- Grâce à GéoDAE, les secours localisent rapidement votre DAE, une déclaration fiable permet de sauver des vies.

Assurez la maintenance de votre DAE

- Tenez à jour un inventaire et un registre des opérations réalisées.
- La maintenance peut être faite par vous-même, le fabricant ou un prestataire, mais la responsabilité reste à l'exploitant.
- Si vous externalisez, il est recommandé de formaliser les responsabilités par contrat (norme NF EN 13269).
- En cas de manquement, vous vous exposez à des sanctions sévères : jusqu'à 2 ans de prison et 150 000 € d'amende.

Votre checklist de contrôle

- Je vérifie la propreté, l'intégrité et l'absence d'usure ou de dommages sur l'appareil et les accessoires.
- Je m'assure que le témoin d'autotest/luminosité fonctionne correctement.
- Je contrôle les dates de validité des électrodes et de la batterie et je les remplace avant expiration.
- Je vérifie l'intégrité des emballages et connexions, surtout pour les électrodes pré-connectées.
- Je m'assure du bon état du boîtier et je veille à ce qu'il soit protégé des intempéries et variations de température.
- Je vérifie la présence, l'intégrité et la péremption des consommables (ciseaux, rasoirs, clés pédiatriques...).

Consignez chaque action dans votre registre.

Remplacez immédiatement tout élément endommagé ou périmé.

Alertez votre référent en cas de défaillance et appliquez la procédure fabricant.

Rendez votre DAE visible et accessible

- Installez-le dans un endroit visible et accessible à tout moment, avec une signalétique claire.
- Affichez près de l'appareil les coordonnées de votre référent maintenance et la date du prochain contrôle.

Vous êtes un maillon clé de la chaîne de survie

- Le DAE est un dispositif qui sauve des vies : chaque minute compte lors d'un arrêt cardiaque.
- En France, 40 000 à 50 000 personnes meurent subitement chaque année. Le taux de survie peut tripler si la chaîne de survie est respectée.



Comment déclarer mon DAE ?

Trois moyens vous sont proposés pour procéder à la déclaration :

- Soit au moyen du formulaire disponible sur le portail de déclaration sur geodae.atlasante.fr ;
- Soit par le dépôt d'un fichier sur le même portail de déclaration.
- Soit par une interface technique entre votre système d'information et la base de données nationale, selon les spécifications techniques en vigueur. Pour ce mode, contactez les équipes du ministère en charge de la base de données à l'adresse suivante : (contact@geodae.sante.gouv.fr).

L'arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux défibrillateurs externes et à leurs modalités de signalisation dans les lieux publics et les établissements recevant du public précise les données que vous devez obligatoirement transmettre, les informations complémentaires non-obligatoires et les informations déterminées automatiquement par l'outil informatique.

Outre faciliter l'accès aux DAE, la base de données vous permet également de mieux piloter votre parc de DAE, grâce à un espace dédié sur le portail de déclaration.

Toutes les informations sur
geodae.atlasante.fr

